

Avvertenze

Avvertenze Generiche

- Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio o incorretto.
- L'uso improprio o incorretto potrebbe danneggiare l'apparecchio e nuocere all'utente.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore ai 6 anni e da persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di necessaria esperienza o perizia, purché opportunamente supervisionate e istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui rischi ad esso connessi.
- Il prodotto contiene piccole parti. I bambini non devono assolutamente giocare con esso. Il prodotto non è un giocattolo.
- La pulizia e la manutenzione non dovranno essere effettuate da bambini senza l'opportuna supervisione.
- Utilizzare solo accessori approvati per l'uso con questo prodotto.
- Non tentare mai di inserire oggetti all'interno dell'apparecchio.
- Non tentare mai di aprire l'apparecchio da soli!
- Solo per usi domestici

Note sulla batteria

! AVVERTENZE:

- Le batterie non vanno ricaricate, smontate, gettate nel fuoco o messe in corto-circuito. Rischio di incendio ed esplosioni!
- Tenere le batterie al di fuori della portata dei bambini. Non sono giocattoli!
- L'ingestione di batterie è estremamente pericolosa. Nel caso di ingestione di batterie, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Nel caso una batteria perda fluidi, evitare il contatto tra questi e gli occhi o la pelle. Nel caso di contatto accidentale, sciacquare con abbondante acqua e, se necessario, contattare un medico.

Pericolo: Sostituire sempre tutte le batterie allo stesso tempo, e usando sempre batterie dello stesso tipo.

Le batterie possono contenere sostanze tossiche dannose per la salute e l'ambiente. Disfarsi delle batterie usate secondo le modalità previste da leggi e regolamenti locali.

Non gettare le batterie con i rifiuti domestici ordinari.

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarlo al sicuro per riferimento futuro.

Introduzione

Il trattamento del bagnare o bagnare il letto (termine medico: enuresi notturna) usando un allarme per quando il letto si bagna, come nel caso del sensore di urina, può essere una soluzione al problema nella maggior parte dei casi. Con l'esercizio costante, sarà possibile addestrare il mancato riflesso a svegliarsi a causa della pressione nella vescica.

Secondo le teorie correnti, uno o due episodi "umidi" al mese rientrano nella norma!

Specifiche tecniche

Piesel Piepser (Sensore di Urina) HIMINr: 15.25.18.0027 PZN: (07232676)
Dimensione Ricevitore: 90 x 60 x 30mm (H x B x T) Peso: 45g
Dimensioni Trasmettitore: 55 x 30 x 8mm (H x B x T) Peso: 8g

Batteria: 1 x al litio CR2032 (3,0V), 3 x AAA (1,5V)

Nota: Usare solo batterie del tipo indicato per il sensore di urina. Non usare alcun altro tipo di batteria.

Nella Confezione

Sensore di Urina
Pacco Batteria
Spinotto ON/OFF x 2
Istruzioni Operative
Diario del Bambino
Set di Adesivi
Diario dei Genitori
Cacciavite
Gettone in Plastica



I Diari

Il diario dei genitori va compilato dai genitori. Sono disponibili 4 colonne per ogni giorno/notte. Per migliori risultati, inserire informazioni dettagliate secondo i seguenti criteri:

B = bagnato, vescica completamente svuotata nel letto

MB = mutande bagnate

LU = letto umido, ma non bagnato

A = asciutto

Il diario del bambino va compilato dal bambino. Il bambino dovrà ricevere un adesivo come ricompensa per essere rimasto asciutto tutta la notte e non aveva azionato l'allarme. Nel caso in cui il letto fosse bagnato, il bambino dovrebbe scriverlo sul diario.

Attivare il dispositivo



Alla consegna lo spinotto on/off è inserito nel dispositivo per garantire che l'alimentazione sia interrotta. Fin quando lo spinotto on/off è inserito nel ricevitore, il dispositivo è spento. Selezionare il tipo di allarme desiderato (solo vibrazione, vibrazione + suoneria o solo suoneria). Attivare il ricevitore rimuovendo lo spinotto ON/OFF. **Attenzione:** Lo Spinotto On/Off va rimosso prima di ogni utilizzo! **Nota:** Questo prodotto può funzionare incorrettamente nel caso sia esposto a scariche elettrostatiche. In questo caso, resettarlo manualmente.

Funzionamento

Inserisci tre batterie AAA nel ricevitore e una batteria a bottone CR2032 nel trasmettitore.

Nota: accertarsi che l'anello di tenuta arancione nel trasmettitore sia posizionato correttamente.

Quando rimuovi lo spillo di accensione/spengimento, il LED verde si accenderà per ca. 3 secondi. Il dispositivo sarà così pronto per essere utilizzato.

Nota sull'abbinamento (solo per la prima configurazione) "Pausa/Abbinata"

1. Per eseguire l'abbinamento Bluetooth è necessario premere rapidamente per tre volte il pulsante Pausa/Abbinamento; i trasmettitori nel raggio di dieci metri saranno abbinati.
Nota 1: abbinare solo un trasmettitore ed un ricevitore durante la procedura di abbinamento. L'abbinamento di più unità potrebbe interrompere il processo di abbinamento.
Nota 2: In caso di problemi di abbinamento, tieni premuto il pulsante di pausa per dieci secondi, fino a quando il ricevitore lampeggia e vibri due volte. Questo resetterà la memoria. Riprova quindi a ripetere la procedura di abbinamento.
2. Per verificare lo stato dell'abbinamento, premi due volte il pulsante di abbinamento, l'indicatore LED lampeggerà 4 volte se la connessione è avvenuta correttamente.
3. L'inserimento dello spillo di accensione/spengimento durante la procedura di abbinamento può causare un cattivo funzionamento.
4. Il trasmettitore e il ricevitore abbinati impiegano circa 30 secondi per riconnettersi una volta scollegato lo spillo di accensione/spengimento.
5. Se la connessione viene ristabilita, il ricevitore lampeggia in verde se connessione al trasmettitore viene interrotta. Il lampeggio si interrompe dopo 3-5 secondi, non appena la connessione viene ristabilita.

Se il trasmettitore si bagna, si attiverà l'allarme. Il LED rosso sul trasmettitore lampeggerà 3 volte e attiverà l'allarme del ricevitore entro cinque secondi.

Se il trasmettitore non viene rimosso dalla biancheria intima bagnata, l'allarme si attiverà ogni minuto. Rimuovi il trasmettitore dalla biancheria bagnata, puliscilo con un panno umido e quindi asciugalo bene. Reinserisci il trasmettitore come descritto qui di seguito.

Non appena viene attivato l'allarme, il LED verde lampeggerà per 2 minuti, quindi riprenderà dopo 30 secondi.

Premi il tasto di pausa per silenziare temporaneamente l'allarme

(l'allarme sarà silenziato per circa 30 secondi).

Nota: l'allarme viene completamente disattivato solo inserendo lo spillo di accensione/spengimento. Il volume del ricevitore può essere regolato con l'apposita manopola. Prova il volume prima dell'uso. **AVVERTENZA:** il volume dell'allarme può raggiungere fino a 100dB entro una distanza di 30cm. Per evitare il rischio di danni permanenti all'udito, NON mettere MAI il ricevitore vicino all'orecchio! Il volume va regolato solo usando il cacciavite in dotazione. Ruota delicatamente la manopola del volume per evitare che si danneggi.



Come installare il dispositivo

1. Selezionare la modalità per l'allarme
 - solo suoneria
 - solo vibrazione
 - vibrazione + suoneria
2. Sistemare e fissare il trasmettitore nelle mutandine (vedi foto).
Nota: Si raccomanda di inserire il trasmettitore in un salvaspina al fine di evitare il contatto diretto con la pelle. Un contatto diretto con la pelle potrebbe attivare un falso allarme e/o provocare l'irritazione della pelle a contatto con il trasmettitore.
3. Verificare che il ricevitore riceva il segnale!
Nota: Nel caso di batteria scarica, il dispositivo emetterà un segnale acustico.
Ricevitore: Il LED rosso lampeggerà per un secondo.
Trasmettitore: Il LED rosso lampeggerà ogni 5 secondi. Dopo 5 minuti, il LED rosso lampeggerà ogni 10-20 secondi.



Bambine: in prossimità della vagina



Bambini: in prossimità del pene

10 suggerimenti per un addestramento efficace

1. Siete Pazienti! L'addestramento e i risultati positivi hanno bisogno di tempo!
2. Motivare il vostro bambino.
3. Il sensore di urina deve essere usato tutte le notti.
4. Discutete nei dettagli con il vostro bambino la funzione del sensore e fate pratica nel cambiare il sensore insieme a lui.
5. Sistemate il dispositivo in un proteggi-slip, in modo da limitarne la scomodità.
6. Incoraggiate il bambino ad andare al gabinetto prima di coricarsi.
7. Nella fase iniziale, spesso l'allarme non è udito dal bambino, e potreste essere voi a doverlo svegliare. Trascorsi i primi giorni la maggior parte dei bambini si sveglia da sé.
8. Il bambino dovrebbe imparare a spegnere l'allarme in breve tempo, ed andrà aiutato a farlo finché non dimostrerà padronanza della tecnica.
9. I diari inclusi contribuiranno a supervisionare l'uso del dispositivo.
10. Una volta terminato con successo il trattamento, potrete contribuire al miglioramento del prodotto inviandoci i vostri diari. I dati in essi contenuti resteranno anonimi e saranno usati solo per rilievi statistici. Come premio per la vostra gentilezza riceverete una piccola sorpresa!

Possibili guasti e soluzioni



Il ricevitore non suona

Esamina: testare il funzionamento attivando il trasmettitore (con un panno umido o facendo contatto con una graffetta), quindi verificare che il LED del sensore stia lampeggiando (vedi foto).

Causa 1: Il trasmettitore è circondato da troppo tessuto.

Rimedio: Riposizionare il trasmettitore.

Causa 2: Batteria esausta.

Rimedio: Sostituire la batteria seguendo le istruzioni.

Causa 3: Dispositivo guasto.

Rimedio: Rivolgersi al distributore o al produttore per le riparazioni.

Causa 4: Batteria scarica. La suoneria è troppo bassa.

Rimedio: Sostituire la batteria seguendo le istruzioni.

Sostituzione della batteria

Ricevitore: Svitare il coperchio del vano batteria e sostituire con tre batterie nuove di tipo AAA.

Trasmettitore: Svitare il coperchio del vano batteria usando l'incluso gettone in plastica e sostituire con una batteria di tipo CR2032.

Nota:

- Non usare batterie vecchie e nuove allo stesso tempo.
- Accertarsi che le batterie siano inserite rispettando la corretta polarità.
- Rimuovere le batterie scariche dall'apparecchio.
- Rimuovere le batterie se non si usa l'apparecchio per lunghi periodi.
- Accertarsi che i poli della batteria non siano in corto circuito.
- Non ricaricare le batterie non-ricaricabili.
- Accertarsi che la guarnizione a O del trasmettitore sia correttamente installata.

Pulizia e Manutenzione

Spegnere sempre l'apparecchio e rimuovere la batteria prima di pulirlo. Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.

Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido morbido.

Non usare prodotti di pulizia corrosivi e/o attrezzi duri per la pulizia dell'apparecchio.

Istruzioni per lo Smaltimento

Le batterie, standard o ricaricabili, non devono essere smaltite con i rifiuti domestici ordinari. In quanto acquisite, siete legalmente tenuto a consegnare le batterie usate ai punti di raccolta preposti. Le batterie usate possono essere consegnate a un punto di raccolta pubblico locale o ai rivenditori di batterie dello stesso tipo.


Nota: I seguenti codici sono stampati su batterie contenenti sostanze tossiche:

Pb = La batteria contiene piombo

Cd = La batteria contiene cadmio

Hg = La batteria contiene mercurio

I dispositivi elettrici contenenti marchio non vanno gettati con i rifiuti domestici ordinari, ma raccolti a parte. Al termine del suo ciclo di utilizzo, perciò, questo dispositivo dovrà essere consegnato al competente punto di raccolta differenziata o al proprio rivenditore locale.

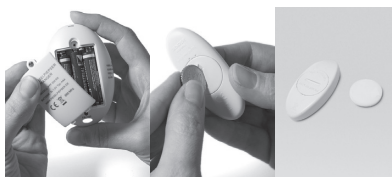

Dichiarazione di conformità

Classe di Protezione I

Piesel-Piepser (Sensore di Urina)

Questo prodotto è stato progettato, sviluppato e prodotto nel rispetto della Direttiva sulle Apparecchiature Radio (2014/53/EU) della UE, sotto l'esclusiva responsabilità di

Osthoff-Vertretungen, Eintrachtstr. 41, 40699 Erkrath

I seguenti standard armonizzati sono in vigore:

EN 301489

EN 300328

EN 62479

EN 60529